

IMAGES CLINIQUES PERSONNALISÉES : IES - MULTILEVEL



FILTRES CASTELLINI - IES (IMAGE ENHANCEMENT SYSTEM)

Le logiciel d'élaboration des images X-VS de dernière génération a pour objectif d'optimiser l'efficacité diagnostique. Avec une excellente résolution de l'image et une interface logicielle conviviale, X-VS facilite l'interprétation des images intra-orales. Les nouveaux filtres CASTELLINI iES (Image Enhancement System) sont le fruit d'une recherche ayant pour objectif de répondre aux exigences réelles des dentistes. Grâce aux algorithmes propriétaires optimisés tout spécialement pour le capteur X-VS, on peut acquérir, visualiser et partager un groupe d'images sur plusieurs niveaux simultanément (5 maximum). Chaque image est le fruit d'une amélioration différente, utile pour mettre en évidence différents détails anatomiques avec différents niveaux de netteté. Il est possible de personnaliser le contraste de l'image en fonction de vos préférences diagnostiques ou visuelles, ce qui permet d'établir un diagnostic encore plus précis. Il est possible, par la suite, de rendre les paramètres favoris automatiques.

IMAGERIE RXDC X-VS

Doté du logiciel iRYS ultra-moderne, X-VS offre aujourd'hui la fonction polyvalente : MultiLEVEL, qui permet de pré-régler les filtres d'élaboration des images visualisables sur plusieurs niveaux. Il est possible de sélectionner quels filtres utiliser parmi les familles pré-paramétrées et de définir d'autres personnalisations ; on accède à ces options depuis la fenêtre d'affichage des images iRYS. Cela se traduit en une zone de confort personnalisée pour chaque professionnel, pour chaque rendez-vous.

LA DIMENSION PARFAITE DE L'IMAGERIE



BU Medical Equipment
Sede Legale Ed Amministrativa
Headquarters
CEFLA s.c. - Via Salice Provinciale, 23/a
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653311
Fax +39 0542 653344

Stabilimento
Plant
CEFLA s.c. - Via Broccoca, 14/C
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653441
Fax +39 0542 653401

CASTELLINI.COM

06/2021 CMAFR201S00

Objet d'une mise à jour technologique constante, les caractéristiques techniques indiquées peuvent être modifiées sans préavis. Conjointement aux réajustements en vigueur dans les zones hors UE, certains produits et/ou caractéristiques pourraient avoir des disponibilités et spécificités différentes. Nous vous invitons à contacter le distributeur local.








IMAGERIE RXDC X-VS LA DIMENSION PARFAITE DE L'IMAGERIE

| CAPTEUR : X-VS | Taille 1 - Normal | Taille 2 - Grand |
|--|--|------------------|
| Dimensions externes (mm) | 38,9 x 24,9 | 41,9 x 30,4 |
| Épaisseur (mm) | 5,3 | 5,7 |
| Matrice de Pixel | 1500 x 1000 | 1700 x 1300 |
| Dimension Pixel (µm) | 20 | 20 |
| Résolution maximum (lp/mm) | 25 | 25 |
| Profondeur des niveaux de gris | acquisition à 14 bits - 16384 niveaux de gris maxi | |
| Technologie du scintillateur | CsI (Iodure de Césium) avec structure micro-colonnaire | |
| Protection contre l'irradiation directe | FOP (couche de Fibres Optiques) | |
| Degré de protection | IP 67 (Garanti contre la pénétration de liquides et de poussière) | |
| Compatibilité avec des générateurs radiographiques | N'importe quel générateur AC ou DC avec facteurs techniques compris entre 60 et 70 kV et contrôle de précision des temps d'exposition | |
| Connectivité | USB Directe sur PC | |
| Logiciel d'acquisition (pour PC) | iCapture avec filtres dédiés pour logiciels tierce partie | |
| Logiciel de gestion d'images (pour PC) | iRYS (conforme au schéma ISDP®10003:2018 conformément à la norme EN ISO/IEC17065:2012 certifié numéro 2019003109-1) et application iPad iRYS viewer (gratuits) | |
| Protocoles pris en charge | DICOM 3.0, TWAIN, VDDS | |
| Nœuds DICOM | Conforme IHE (Print ; Storage Commitment ; document SR ; WorkList ; MPPS ; Query/Retrieve) | |
| Configuration minimale de système requise | | |
| Systèmes d'exploitation supportés | Microsoft® Windows® 10 Professional 64 bit | |
| Paramètres d'affichage | 1280x1024 ; 1344 x768 ou supérieur, 16 millions de couleurs | |
| Port | USB 2.0 ou supérieur | |
| Alimentation | 5 VDC, 500 mA (par l'intermédiaire du port USB) | |

| APPAREIL RADIOGRAPHIQUE RXDC | |
|---|---|
| Générateur | À potentiel constant, commandé par micro-processeur |
| Fréquence de service | 145 à 230 KHz avec réglage automatique (175 KHz typiques) |
| Foyer | 0,4 mm (IEC 336) |
| Filtration totale | 2,0 mm Al @ 70 kV |
| Courant anodique | 4 / 8 mA |
| Tension au tube radiogène | 60 / 65 / 70 kV (*) |
| Temps d'exposition | 0,020 à 1,000 secondes, échelle R'10 et R'20 |
| Distance foyer - peau | 20 et 30 cm |
| Champ d'irradiation | Ø 60 mm et Ø 55 mm (avec cône rond) |
| Collimateurs additionnels | 35 x 45 mm (avec cône rectangulaire pour les capteurs taille 2), 31 x 41 mm et 22 x 35 mm, pour les capteurs taille 1 et taille 0 |
| Alimentation | 50/60 Hz, 115-120 Vac +10 % ou 230-240 Vac +10 % |
| Cycle de service | Fonctionnement en continu avec réglage automatique jusqu'à 1 s/90 s totaux |
| Bras (seulement pour la version Standard) | Disponibles en 3 longueurs : 40 cm - 60 cm - 90 cm |
| Extension maximum du bras | 230 cm par rapport au mur |
| Versions | Standard (murale) ou Mobile (sur chariot portable) |

(*) valeurs dépendant du pays où le produit est commercialisé.

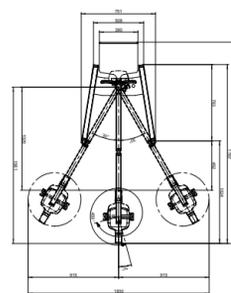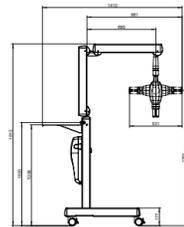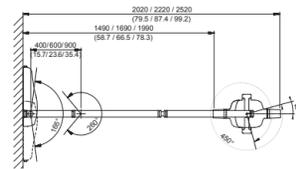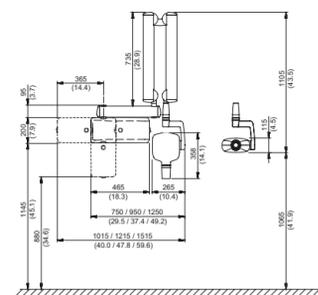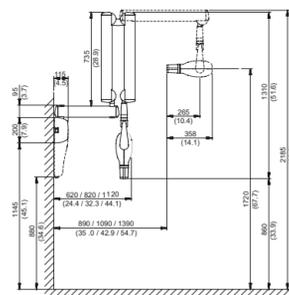

IMAGERIE RXDC X-VS LA DIMENSION PARFAITE DE L'IMAGERIE

CASTELLINI.COM




CASTELLINI
PASSION FOR DENTISTRY SINCE 1935

UN DIAGNOSTIC IMMÉDIAT, UN RÉSULTAT EXCELLENT



RXDC est un appareil radiographique polyvalent et intuitif capable de réaliser des images de haute qualité grâce à la technologie la plus avancée. Il garantit en outre un confort de travail et une faible dose radiogène pour le patient, en maintenant les performances à un très haut niveau. RXDC utilise en effet un générateur à haute fréquence (DC) à potentiel constant et une tache focale de dimensions très réduites (0,4 mm) capables de fournir des images détaillées et nettes. Détermination automatique des paramètres d'exposition et sélection minutieuse de puissance, RXDC est l'appareil radiographique adapté à n'importe quelle situation, personnalisé en fonction de la taille du patient et de la zone à examiner. RXDC est l'appareil radiographique parfait, en mesure d'associer une imagerie haute définition, un design polyvalent et ergonomique et une faible dose pour le patient.

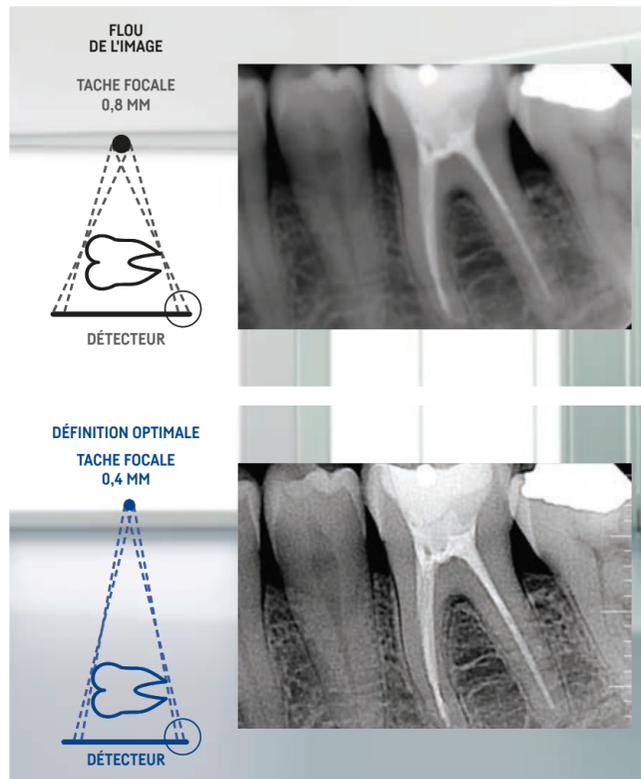

Une ergonomie innovante, la connexion USB plug-and-play directe, la haute définition et la rapidité du résultat font de X-VS - technologie X-VISUS HD le capteur de pointe le plus adapté pour le travail en cabinet. La simplicité d'utilisation et l'acquisition d'image associées à la haute technologie numérique en temps réel améliorent la qualité du travail. Résistant aux chocs et à la poussière, certifié IP67 résistant à l'eau, X-VS - technologie X-VISUS HD est utilisable avec tous les appareils radiographiques. X-VS - technologie X-VISUS HD utilise iRYS, le logiciel all-in-one idéal pour le diagnostic, la communication et la gestion de l'imagerie intra-orale, grâce auquel il est possible d'archiver, de gérer et d'imprimer les images, en parfaite synergie avec d'éventuels autres dispositifs déjà présents dans le cabinet.

RXDC APPAREIL RADIOGRAPHIQUE HAUTE FRÉQUENCE HAUTE DÉFINITION. DOSE MINIMALE

RXDC augmente le parallélisme des rayons X : grâce au collimateur incorporé, il permet d'atteindre une distance foyer-peau de 30 cm. Des bords nets, des images claires et la précision des détails, le tout en maintenant une dose réduite pour le patient. Il présente un design ergonomique et se caractérise par sa simplicité et fiabilité grâce aux bras solides en aluminium extrudé dotés d'un système d'auto-équilibrage intégré. Le positionnement des bras et de la tête est pratique et stable. Grâce au goniomètre avec échelle graduée, l'appareil radiographique se positionne facilement.



POLYVALENCE ET MOBILITÉ OPTIMALES

RXDC encore plus pratique et polyvalent, installé au mur, avec 6 positions variables - 3 rallonges disponibles dans les longueurs : 40, 60 et 90 cm - ou, grâce au chariot, il se déplace facilement pour être utilisé dans les différentes zones du cabinet. Un seul appareil radiographique quels que soient les besoins opérationnels.

IMAGERIE RXDC X-VS

LA DIMENSION PARFAITE DE L'IMAGERIE




ÇÔNES COLLIMATEURS

Avec le cône collimateur incorporé, on obtient une distance foyer-peau de 30 cm. Le cône rectangulaire, en option, réduit davantage la surface corporelle soumise aux rayons.



CONTRÔLE FACILITÉ


Télécommande simple et intuitive qui permet de sélectionner le programme le plus adapté pour une acquisition radiographique parfaite. En outre, grâce au Dynamic Duty-Cycle rapide, il est possible de garder sous contrôle la température du tuyau et de vérifier, en temps réel, la dose exacte de rayons administrée.

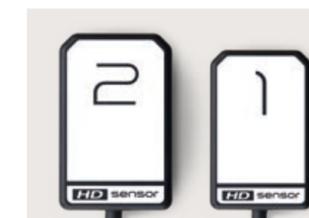

CAPTEUR SUR MESURE

X-VS - technologie X-VISUS HD se caractérise par la possibilité de choisir entre deux tailles de capteur qui le rendent encore plus adaptable à la dimension de la cavité orale du patient. Confort de positionnement élevé grâce aux bords émoussés ; de hautes performances, des dimensions réduites et une zone active optimale.

IMAGERIE RXDC X-VS

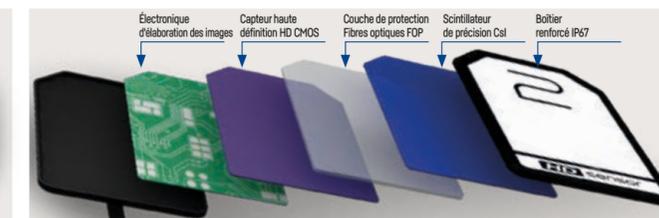

CAPTEUR HD DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Capteur à 4 couches plus une couche de protection, pour fournir des images nettes et à contraste élevé. Un scintillateur à l'iode de césium [CsI], constitué de micro-structures en forme de colonne en mesure de préserver la qualité d'image, intercepte en premier le faisceau de rayons X et le convertit en lumière visible. Le Fibre Optics Plate (couche de fibres optiques) collimate les radiations sur le capteur et le protège de la pénétration directe des rayons X. Le dispositif d'acquisition en haute définition [HD CMOS] et l'électronique à bord convertit la lumière en une image numérique en fournissant 16 384 nuances de gris.

LA DIMENSION PARFAITE DE L'IMAGERIE